


Каталог оборудования Azimut

Azimut 100A н/п с одним стулом

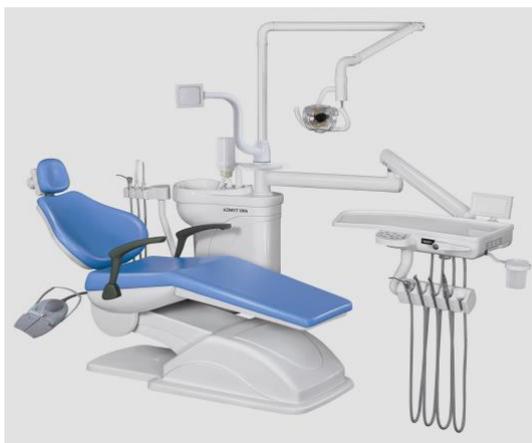

Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) управление кресла
- Б) вкл./выкл. светильника
- В) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Г) смыв гигиенической раковины
- Д) наполнение стакана
- Е) положение для полоскания

Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном

модуле.

Гидроблок. Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный:

Бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180°.

Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Кнопка антиспид
Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача под цвет установки.

Azimut 100A н/п (новая модель)



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) управление кресла
- Б) вкл./выкл. светильника
- В) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Г) смыв гигиенической раковины
- Д) наполнение стакана
- Е) положение для полоскания

Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок. Гидроблок с пластиковой гигиенической раковиной, оборудованный:

Бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180°.

Кресло (широкое кресло). Бесшовное покрытие, два подлокотника (левый откидной).

Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Кнопка антиспид.

Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача, стул ассистента под цвет установки.

Azimut 100A в/п



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с верхней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) управление кресла
- Б) вкл./выкл. светильника
- В) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Г) смыв гигиенической раковины
- Д) наполнение стакана.
- Е) положение для полоскания

Мобильный поднос для инструментов, поворачивающийся на 180°. Негатоскоп. Манометр рабочего давления.

Механические регуляторы давления воды и воздуха на

каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок. Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный:

Бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180°.

Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды.

Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача под цвет установки.

Azimut 200A н/п



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) вкл./выкл. установки
- Б) управление креслом
- В) вкл./выкл. светильника
- Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Д) смыв гигиенической раковины
- Е) наполнение стакана
- Ж) положение для полоскания

Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы

давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок со стеклянной плевательницей, поворачивающейся на 90°, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента (на 4 инструмента): Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180° (5 кнопок управления).

Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы. Кнопка антиспид.

Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача стул ассистента под цвет установки

Azimut 200A в/п



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с верхней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) вкл./выкл. установки
- Б) управление креслом
- В) вкл./выкл. светильника
- Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Д) смыв гигиенической раковины
- Е) наполнение стакана
- Ж) положение для полоскания

Мобильный поднос для инструментов, поворачивающийся на 360°. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает

воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок со стеклянной плевательницей, поворачивающейся на 90°, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок.

Модуль ассистента (на 4 инструмента): Оборудован дополнительным водно-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180°.

Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы. Кнопка антиспид

Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача стул ассистента под цвет установки

Azimut 300A classic н/п



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

- А) вкл./выкл. установки
- Б) управление кресла
- В) вкл./выкл. светильника
- Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
- Д) смыв гигиенической раковины
- Е) наполнение стакана
- Ж) положение для полоскания

Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности находятся под врачебным модулем. Стаканчик

для сбора масляного конденсата из отработанного воздуха. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на

врачебном модуле.

Гидроблок поворотный 180° со стеклянной, матовой плевательницей. Оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента (на 4 инструмента). Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180°, имеет блок управления креслом, вкл./выкл. бойлера, 7 кнопок управления.

Кресло. Бесшовное покрытие, 2 подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Система антиспид.

Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача. Под цвет установки

Стул ассистента. Под цвет установки.

Azimut 300A elegance н/п



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

А) вкл./выкл. установки

Б) управление кресла

В) вкл./выкл. светильника

Г) вкл./выкл. бойлера

Д) смыв гигиенической раковины

Е) наполнение стакана

Ж) положение для полоскания

Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности находятся под врачебным модулем. Стаканчик для сбора масляного конденсата из отработанного

воздуха. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок поворотный 180° со стеклянной, матовой плевательницей. Оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента (на 3 инструмента). Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180°, имеет блок управления креслом, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, 7 кнопок управления.

Кресло. Память на 3 положения кресла. Бесшовное покрытие, 2 подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Система антиспид.

Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача. Под цвет установки

Стул ассистента. Под цвет установки.

Azimut 400A classic

Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

вкл./выкл. установки, управление креслом, вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана. Положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, закрытые колпаком,

для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водно-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.


Кресло. Бесшовное покрытие, 2 подлокотника. Память на 3 положения кресла. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы. Система антиспид

Светильник. Сенсорный, закрытый, два уровня освещения. Автоматическое включение.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента: под цвет установки.

Azimut 400A elegance

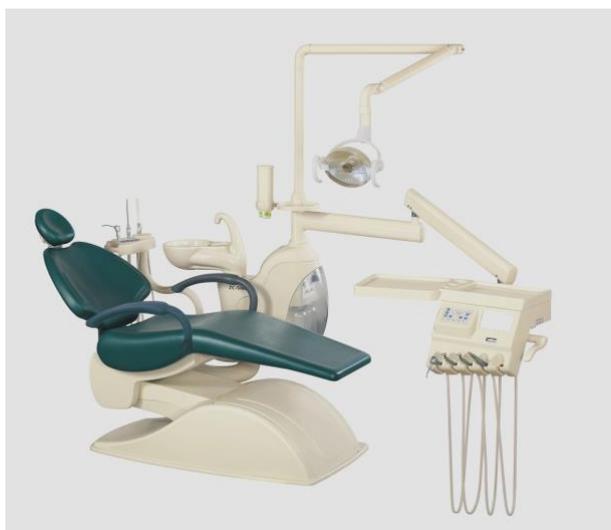

Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водно-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:

вкл./выкл. установки, управление креслом вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана. Блок управления креслом оборудован программной памятью на три положения кресла (в каждой программе 3 подпрограммы), кнопкой возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле. Положение для сплевывания.

Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, закрытые колпаком, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водно-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.

Кресло (широкая спинка и сидение). Память на 9 положений кресла (индивидуальное программирование)

для 3-х врачей). Бесшовное покрытие, Два подлокотника. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник. Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы (антиспид).

Светильник. Сенсорный, закрытый, два уровня освещения. Автоматическое включение.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента: под цвет установки.

Azimut 500A



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водовоздушный пистолет. ЖК-дисплей, отображающий работу инструментов, кресла, светильника. Модуль оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки, управление креслом, вкл./выкл. светильника (интенсивность освещения), вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана, положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографического плеча придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном

модуле.

Гидроблок с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, фильтры грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водовоздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180°. Возможность подключения двух дополнительных опций.

Кресло. Шовное покрытие. Натуральная кожа. 2 подлокотника (правый откидной). Память на 3 положения кресла. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.

Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, джойстик управления креслом, функцией продувки системы.

Светильник Fargo. Закрытый, два уровня освещения. Автоматическое включение. Внутреннее охлаждение.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента: под цвет установки.